

## ACTIVE PAD MOTE CARE

MXES-R400 MXES-R200


附保修书

## 使用说明书

非常感谢您选购麦克赛尔的产品。在使用之前,请务必仔细阅读本使用说明书,确保正确地使用。另外,本使用说明书同时兼作保修书之用,请妥善保管。


## 包装品的确认

MXES-R400 (4个电极型)

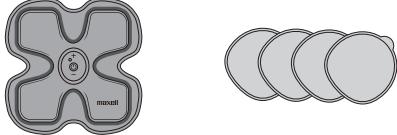

主体x1 4电极用凝胶垫x4

MXES-R200 (2个电极型)

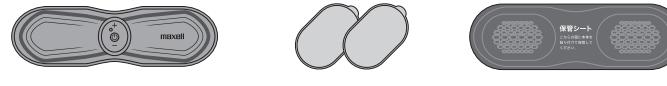

主体x1 2电极用凝胶垫x2

## 共同的随附部件



电源适配器x1



充电线(约50cm)x1



使用说明书(本说明书)x1

## 1 前言

## 阅读使用说明书时

●该使用说明书如发生任何变更,恕不另行通知。

●由于产品的不断改良更新,外观或规格可能有所变更,恕不另行通知。

●除用户个人使用外,禁止擅自对该使用说明书的一部分或者全部进行复印。另外,坚决拒绝擅自转载。

## 免责事项(保修内容的相关信息,请参照保修书部分)

●由于火灾、地震、第三者的行为、其他事故、客户故意或过失、误用以及其他异常条件下的使用所造成的损害,本公司不承担任何责任。

●保修书上所记载的保修事项已经是全部内容,除此保证之外,再无任何明示或默示的保证。

●对于未遵循本使用说明书中的说明事项而导致的损害,本公司不承担任何责任。

●本产品的设计意图并非用于医疗设备、原子能设备、航空航天设备、运输设备等关乎人命的设备,以及需要高度可靠性的设备及仪器方面。如果在这些设备、仪器控制系统中使用本产品,由于本产品的故障导致人身事故、火灾事故等发生的情况下,本公司不承担任何责任。

## 2 安全注意事项

为了安全使用,请务必遵守!

## ! 危险

表示“如果误用,可能导致死亡或重伤<sup>\*1</sup>事故,且程度严重”。

## ! 警告

表示“如果误用,可能导致死亡或重伤<sup>\*1</sup>事故”。

## ! 注意

表示“如果误用,可能导致轻伤<sup>\*2</sup>,或财物损害<sup>\*3</sup>事故”。<sup>\*1</sup>: 所谓重伤是指失明、烧伤、触电、骨折、中毒等留有后遗症的伤害,以及需要住院治疗和长期去医院治疗的伤害。<sup>\*2</sup>: 所谓轻伤是指无需住院治疗或无需长期去医院接受治疗的伤害,如程度较轻的碰撞伤、烧伤、触电等。<sup>\*3</sup>: 所谓财务损害是指殃及房屋、家产及家畜、宠物等的损害。

图例		△符号是指使用产品时,对可能引起起火、破裂、高温等行为唤起注意的符号。图中描述了具体的注意事项内容。 (例:△小心触电)
		○符号是指使用产品时所禁止的行为。具体的禁止内容标注于符号之中或其附近,通过图形或者文字显示。 (例:○禁止拆卸)
		●符号是指在使用产品时,必须遵守强制性指示的行为。具体的强制性内容标注于符号之中或其附近,通过图形或者文字显示。 (例:●从插座中拔下插头)

## ! 危险

## 请勿与医用电器同时使用

请勿和下列的机器同时使用。

- (1) 起搏器等体内嵌入型医用电器设备
  - (2) 人工心脏等用于维持生命的医用电器设备
  - (3) 心电图扫描器等安装型医用电器设备等的各种医用电器设备
- 否则,可能引发事故或身体上的严重障碍。

## 请勿接触漏液

如果从本产品内部泄漏的液体进入眼睛时,请勿擦拭,应该立即用干净的水冲洗,然后立即接受医生的诊查。否则,可能导致失明。

## ! 警告

## 以下人士请向医生洽询后再使用

- (1) 罹患急性疾病的人士 (2) 罹患恶性肿瘤的人士 (3) 罹患传染病的人士
  - (4) 妊娠中、生理期或新近产后的人士 (5) 患有心脏疾病的人士
  - (6) 发烧的人士 (7) 罹患贫血症的人士
  - (8) 使用部位的皮肤存在异常的人士(感染、创伤等) (9) 血压存在异常的人士
  - (10) 必须保持安静的人士及身体明显不适时
  - (11) 罹患脊柱(脊椎)骨折、挫伤(扭伤)、肌肉撕裂等急性(疼痛性)疾患的人士
  - (12) 因糖尿病等严重末梢循环障碍导致知觉障碍的人士
  - (13) 正在进行美容整形或丰胸手术的人士
  - (14) 除上述人士外的其他身体存在异常情况的人士
- 否则,可能导致事故或是身体不适。

## 下列人士请勿使用

- (1) 饮酒的人士 (2) 未满18岁的人士

## 粘贴或剥离凝胶垫时,请务必切断电源

否则,可能遭受强烈的冲击。

## 如身体感到异常,请立即停止使用

否则,可能引发事故或身体不适。

## 请勿用于心脏附近、头部、脸部、眼睛周围、脖颈底部、阴部

否则,可能引发事故或身体不适。

## 请勿在浴室等湿气较多的地方使用

否则,可能导致发热、触电、故障。

## 请勿放入微波炉等加热烹调设备或高压容器中

否则,可能导致发热、冒烟、起火。

## 请勿在手湿的情况下使用

否则,可能导致发热、触电、故障等情况。

## 请勿泼洒水等液体

否则,可能导致发热、冒烟、起火、破裂、故障、受伤。

## 请在婴幼儿的手无法触及的场所使用及保管

否则,可能引发事故或身体不适。

## 请勿在睡觉时使用

否则,可能引发事故或受伤。

## 请勿在佩戴项链等金属饰品的情况下使用

否则,可能遭受强烈的冲击。

## 请勿拆卸或改造本产品

否则,可能导致发热、冒烟、起火、破裂、液体泄漏、故障、受伤。

## 请勿在本产品出现破损时使用

否则,可能引发事故或受伤。

	最多同时用于两个不同的部位 否则,可能引发事故或受伤。
	安装在身体上时,不从事使用水、刀具和火的家务劳动 否则,可能引发事故或受伤。
	请勿使端子短路 否则,可能导致发热、触电、故障、受伤。

## ! 注意

## 在10~35℃的范围内充电

在此温度范围外充电可能导致液体泄漏、发热、破裂、故障。

## 超过规定的充电时间后仍未完成充电的情况下,请停止充电

否则,可能导致液体泄漏、发热、起火、破裂。

## 不施加过大的力度

否则,可能导致变形、液体泄漏、发热、起火、破裂、故障。

## 在同一部位使用时,一天不超过两次

一天使用两次时,中间请休息一个小时。

## 不连续使用20分钟以上

长时间的使用可能导致肌肉或神经损伤。

## 请勿一直贴着凝胶垫,置之不顾

否则,可能引发皮肤炎症等情况。

## 使用中请勿使用手机等电子设备

否则,可能由于动作失误导致事故发生。

## 请勿在汽车等的驾驶之前及驾驶过程中使用

否则,可能引发事故或故障。

## 请勿投入火中

否则,可能导致冒烟、起火、破裂。

## 请勿使用附带的电源适配器和充电线以外的设备进行充电

否则,可能导致冒烟、起火、破裂、故障。

## 请勿将附带的电源适配器和充电线用于本产品以外的用途

否则,可能导致冒烟、起火、破裂、故障。

## 请将电源适配器切实插入到底部

如在插入不充分的状态下使用,会导致触电或由于灰尘的堆积而引发火灾。

## 充电中如发生异常情况,请立即将电源适配器从插座中拔出

否则,可能导致冒烟、起火、破裂、故障。

## 请勿在高温场所使用、保管

否则,可能引发事故或受伤、故障。

## 请勿踩踏或摔落本产品,对其造成强烈的冲击


否则,可能导致变形、液体泄漏、发热、起火、破裂、故障等情况。

## 请勿在本产品上放置可燃物或重物,或用毯子、座垫遮盖或包裹本产品

否则,可能导致发热、起火、破裂、液体泄漏。

## 请勿用于锻炼以外的目的

否则,可能引发事故或受伤。

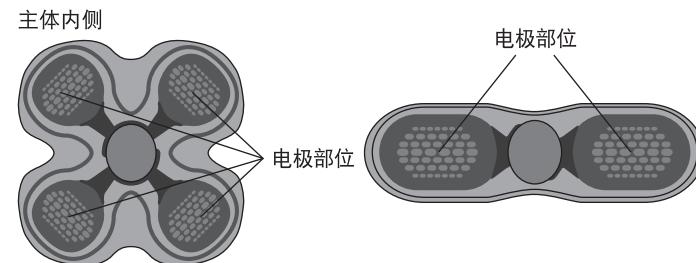

电源适配器

电源插头

USB Micro-B 插头



※充电专用。无法通讯。


## 4 规格

	MXES-R400	MXES-R200
主体	外形尺寸 宽165×高165×厚10.5mm (未安装凝胶垫时)	宽225.5×高65.5×厚10.5mm (未安装凝胶垫时)
质量	约61g (未安装凝胶垫时)	约40g (未安装凝胶垫时)
输入电压/电流	DC5V/最大100mA	
内置电池	锂离子电池 3.7V 60mAh (222mWh)	
充电时间	约1小时 (10~35°C)	
凝胶垫	尺寸 宽56.5×高56.4× 厚0.85mm/1片	宽82.2×高51.8× 厚0.85mm/1片
	质量 约3g/1片	约5g/1片
电源适配器	输入 AC100-240V 50/60Hz	
	输出 DC5V/最大1A	
充电线	长度 约50cm	

・所记载的名称、标志、服务商标是麦克赛尔或其他公司的注册商标或商标。

## 3 各部位的名称

## 主体

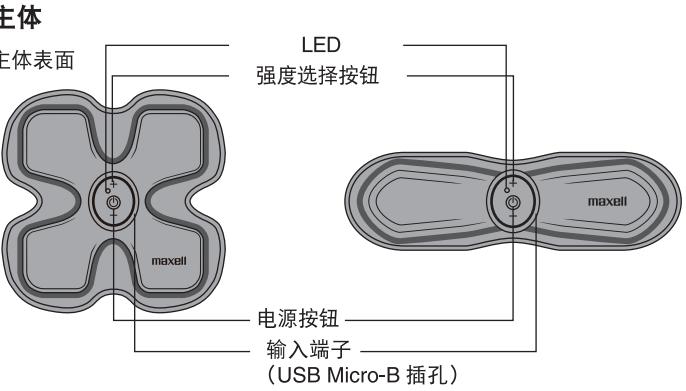

## 5 使用方法

充电(购买后请充电后再使用)

- 1 将充电线插入  
主体和电源适配器



- 2 将电源适配器插入家用插座



- 3 灯熄灭后,断开电源适配器和充电线。

### 注意事项

- 充电时间约1小时。(充电时间根据电池余量和充电环境的不同会发生变化。)
- 充电中无法进行按钮操作。使用时请务必将充电线取下后再使用。
- 请勿使用附带品以外的电线和电源适配器。
- 请在10~35℃范围内充电。
- 充一次电后可使用的次数根据强度的设定等级、使用环境和使用条件不同而发生变化。

使用次数标准	MXES-R200	MXES-R400
强度等级1(最小)	约40次	约30次
强度等级5	约25次	约20次
强度等级15(最大)	约10次	约10次

### 粘贴凝胶垫

- 1 揭下蓝色薄膜



- 2 将凝胶垫粘贴在灰色的各电极部位,  
以防止空气进入。



- 3 按下电源按钮

- 响起“哔”声,然后开始锻炼。

※当凝胶垫没有紧密贴合肌肤时,会反复响起“哔”声,不会开展动作。

※当接通电源时,强度等级从1(最小)开始。

※发出“哔”声的同时,LED灯也会闪烁。

※动作中,LED灯熄灭。

- 4 调整强度

- 有15级强度,按下强度选择按钮的“+”或“-”来选择强度。

※没有声音、LED不点亮、无法感觉到电力刺激等情况时,说明电池余量正在变少。请进行充电。

※当强度达到最大或最小等级时,会响起“哔哔”声。

- 5 结束

- 开始后约20分钟内自动切断电源。  
-中途切断电源时,按下电源按钮会响起“哔哔”声,电源关闭。  
※“哔哔”声响起的同时,LED灯也会闪烁。
- 结束后,以垂直方向从皮肤上缓慢剥离。



### 注意事项

- 使用中感到疼痛或麻痹时,请按下电源按钮结束,改变贴合位置后再进行使用。
- 请勿过度地增加强度。
- 锻炼步骤会自动切换。无法进行手动选择。
- 即使是中途结束的情况,下一次锻炼时也是从15个步骤的最初动作开始。
- 请在10~35℃范围内使用。
- 将凝胶垫从皮肤上揭下时,请慢慢仔细地剥离。否则,可能导致故障。

### 推荐的锻炼方法

获得理想的结果的四个要点

- 请每周休息1~2天。
- 请记录每天的强度,慢慢提高强度。
- 更强的输出等级可能会有更理想的结果,但是请避免过度刺激而导致不舒服的情况。
- 请在电源自动关闭之前(约20分钟内)进行锻炼。

### 保管

使用后请擦干汗液和水分,将保管衬膜贴在凝胶垫上进行保管。

- 确认已断电,避开高温、多湿、太阳直射的场所或多灰尘的场所进行保管。
- 请勿使用保管衬膜以外的纸张进行保管。如果使用别的纸张等时,会变得无法剥离。

## 5 使用方法



### 注意事项

- 如果在错误的粘贴方式下使用,粘合力会变弱,相比使用标准次数,可能出现变得无法使用的情况。
- 插图以4电极类型为例。2电极类型的情况也按照同样的方法进行粘贴。

### 使用

本产品在约20分钟内将自动切换15个步骤的动作,从而展开锻炼活动。

按照以下步骤,贴合身体,开展动作。

- 1 从主体上揭下保管衬膜

- 2 将贴有凝胶垫的主体贴在想要锻炼的部位上



### 4 电极类型的粘贴部位示例

<推荐粘贴部位>

MXES-R400YG(4电极类型):腹部、腰部、大腿

MXES-R200YG(2电极类型):两条胳膊、侧腹、臀部

### ※将充电线的输入端子朝下进行粘贴。

※请先将皮肤上的汗液、水分、污垢擦拭后再贴合到身体上。否则,可能导致粘合力下降。

- 3 按下电源按钮

- 响起“哔”声,然后开始锻炼。

※当凝胶垫没有紧密贴合肌肤时,会反复响起“哔”声,不会开展动作。

※当接通电源时,强度等级从1(最小)开始。

※发出“哔”声的同时,LED灯也会闪烁。

※动作中,LED灯熄灭。

- 4 调整强度

- 有15级强度,按下强度选择按钮的“+”或“-”来选择强度。

※没有声音、LED不点亮、无法感觉到电力刺激等情况时,说明电池余量正在变少。请进行充电。

※当强度达到最大或最小等级时,会响起“哔哔”声。

- 5 结束

- 开始后约20分钟内自动切断电源。  
-中途切断电源时,按下电源按钮会响起“哔哔”声,电源关闭。  
※“哔哔”声响起的同时,LED灯也会闪烁。
- 结束后,以垂直方向从皮肤上缓慢剥离。



## 6 保养

进行保养时请勿充电并确认电源关闭后再进行。在充电状态下或电源接通的状态下进行保养时,可能会遭受冲击。

### 主体的保养

- 请用干燥的软布将污垢擦掉。
- 污垢较为严重时,请用软布沾水,仔细拧干后,轻轻地按压擦拭。

### 注意事项

- 请勿将本产品沾水或向其洒水。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精等化学物质进行擦拭。

### 凝胶垫的保养

当凝胶垫的粘合面变脏,难以贴合在身体上时,请按照以下步骤进行保养。

- 1 将指尖沾上水滴擦拭凝胶垫的粘合面,去除污垢
- 2 充分去除水分,将粘合面朝上,在通风良好的阴凉处让其自然风干
- 3 自然风干到表面的水分消失后,再贴上保管衬膜

凝胶垫是易耗品。即使进行保养,当粘合力较弱的情况下,请使用下列替换用凝胶垫(另售品)进行更换。

产品名称:替换用凝胶垫

型号:MXES-400GEL1P(MXES-R400用1套4片)

MXES-400GEL2P(MXES-R400用2套8片)

MXES-200GEL1P(MXES-R200用1套2片)

MXES-200GEL2P(MXES-R200用2套4片)

### 注意事项

- 长时间或频繁进行保养时,可能导致粘合面损坏,凝胶垫的使用寿命变短。
- 请勿将凝胶垫的表面和表面贴合在一起。另外,使用后请在粘合面上贴保管衬膜进行保管。

## 7 故障判断

如果通过以下“处理方法”无法解决问题,请垂询经销商或本公司的“客户服务中心”。

现象	原因	处理方法
电源无法接通	电池余量少	请充电。
	使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。
警告音一直响 输出功率上升不了 无法运作	开始后20分钟,电源自动关闭 再次使用时,请休息一个小时后再使用。 (一天可以使用两次)	
皮肤极度干燥	请用水将皮肤湿润后再使用。	
凝胶垫没有紧密贴合	请将其紧密贴合后再使用。	
	使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。
凝胶垫已损耗	请更换为新的凝胶垫。	
凝胶垫没有紧密贴合	请将其紧密贴合后再使用。	
电池余量少	请充电。	
等级较弱	请按下强度选择按钮的“+”,提高强度。	
皮肤极度干燥	请用水将皮肤湿润后再使用。	
等级较强	请按下强度选择按钮的“-”,降低强度。	
在不合理的姿势下使用,请将其紧密贴合后再使用。	请将其紧密贴合后再使用。	
电力刺激强 感到疼痛	使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。
凝胶垫已损耗	请更换为新的凝胶垫。	
连续使用20分钟以上	请用于同一部位时请休息一个小时。	
凝胶垫从主体上脱落	将凝胶垫贴在主体的电极部位上后,用手指按压,排除空气后再使用。	

## 8 废弃产品时的要求

本产品配备有锂离子电池。废弃时请务必拆下锂离子电池。

### 危险

请勿对取出的锂离子电池进行充电或以下操作。

- (否则,可能导致发热、起火、破裂)
- 请勿将其投入火中,或对其进行加热。
- 请勿用钉子刺,给其带来冲击,或对其进行拆卸、改造。  
请避免④和⑤与金属等接触。
- 不和项链、发夹等一起携带保管。
- 不将其放置在火源旁边或火焰环境等高温场所。

### 警告

取出的锂离子电池请勿放置在婴幼儿可触及的地方。

●万一将其吞咽下,请立即咨询医生。

锂离子电池漏液时,请勿赤手触摸,使用以下的措施进行处理。

- 当液体进入眼睛时,请勿揉搓眼睛,立即用干净的水进行清洗后,向医生咨询。
- 当液体附着在身体或衣服上时,用干净的水充分冲洗后,向医生咨询。


除废弃产品外,不作拆卸。

(否则,可能引发火灾、触电、受伤)

### 取下锂电池的方法

- 1 将本产品使用到完全无法运作之时,对锂电池进行放电

- 2 将一字螺丝刀等放入主体盒的间隙,打开盒子

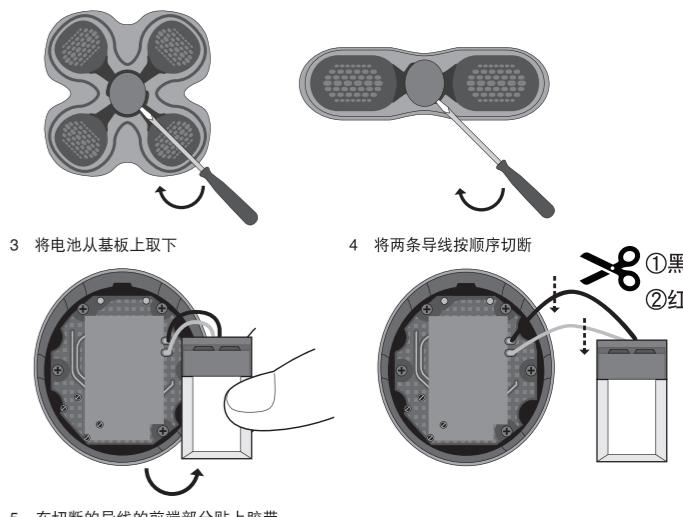

### 注意事项

- 进行废弃操作时,请小心避免受伤。
- 取下的锂离子电池勿使导线相接触(红和黑)。否则,可能短路,导致烧伤。
- 请在不损伤电池的情况下将其取下。

### 使用后请勿作为家庭垃圾处理,将其交给回收合作店

使用完的充电式电池是珍贵的资源。可再次利用。因此请用胶带等将输出端子堵塞后,带到离您最近的充电式电池回收合作店。或者将其放入设置好的“充电式电池回收箱”中。

## 9 保修和售后服务

### 保修书

请仔细阅读保修书后,将其和购买证明(收据等)一起进行妥善保管。  
保修期限为购买之日起1年内。

### 有关本产品的咨询方式

有关本产品如有疑问,请参考下列咨询方式。

麦克赛尔株式会社

邮编151-8527

东京都涉谷区元代代木町30-13

客户服务

TEL:(0570)783-137(日本国内统一服务热线)

FAX:(0570)025-710(日本国内统一服务热线)

<http://www.maxell.co.jp>

咨询maxell

搜索