



Ilexam

光美容器

MXIP-100

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

User manual

For the English version of the user manual,
please refer to the following URL:

https://www.maxell.jp/en/consumer/assets/pdf/mxip-100_manual_en.pdf



产品使用说明

中文版使用说明书请参考以下URL:

https://www.maxell.jp/cn/consumer/assets/pdf/mxip-100_manual_cn.pdf




もくじ


1	同梱品の確認	p. 2
2	はじめに	p. 2
3	安全上のご注意	p. 2
4	製品の特長	p. 5
5	各部のなまえ	p. 6
6	お使いになれる部位	p. 7
7	お使いになれる頻度	p. 9
8	お使いになる前に	p. 9
9	使いかた	p. 10
10	お手入れのしかた	p. 13
11	トラブルシューティング	p. 13
12	本製品を廃棄する	p. 14
13	仕様	p. 14
14	保証とアフターサービス	p. 14

1 同梱品の確認


本体

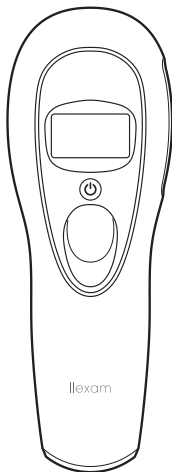

電源アダプター

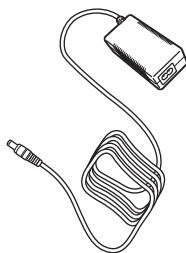

電源ケーブル

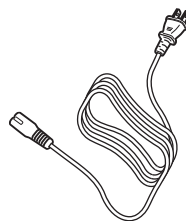

取扱説明書
(保証書付き)

カラーチャート

2 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって




- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証内容については保証書面をご参照ください）

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

3 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される危害の程度
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うことが想定されるかまたは物的損害*3の発生が想定される危害・損害の程度

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するために用いる。 ⊘の形状の中に具体的な禁止事項を意味する図記号を黒色で図示する。
		製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するために用いる。 △の形状の中に具体的な注意事項を意味する図記号を黒色で図示する。
		製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するために用いる。 ●の形状の中に具体的な指示事項を意味する図記号を白系統色で図示する。

⚠ 危険

ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は本体を医用電気機器に近づけない
事故や体調不良の原因となります。



⚠ 警告

以下のような人は使用しない

- ・医師の治療を受けている人 ・18歳未満の人 ・妊娠中、生理中の人 ・皮膚知覚障害の人 ・発熱している人
- ・アレルギー体質の人、化粧品、衣類、金属などにかぶれやすい体質の人 ・急性疾患、結核性疾患、伝染病疾患、悪性腫瘍などのある人 ・アトピー性皮膚炎、湿疹、ヘルペスなど皮膚障害のある人
- ・太陽光で肌が荒れやすい人 ・自分で意思表示ができない人 ・飲酒している人



事故や体調不良の原因となります。

次のような部位には使用しない

- ・日焼けした肌 ・肝斑、シミ、ほくろなど色が暗い部分 ・かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、吹き出物、かぶれ、虫刺されなど ・皮膚がん、タムシ(白せん)、毛のう炎、毛包炎、静脈瘤など ・血管腫 ・美容整形部位
- ・目の周り、眉回り、唇、首、腹部(女性のみ)、外陰部、背中 ・入れ墨、タトゥー、アートメイク ・メイクの上



事故や肌トラブルの原因となります。

ピーリングをした部分の上から使用しない
肌トラブルの原因となります。



薬を継続して服用されている方は医師に相談してから使用する
事故や体調不良を起こす原因となります。



目に直接使用しない
目を傷める原因となります。



乳幼児の手の届かないところで使用、保管する
やけど、感電、けがの原因となります。



衣服や髪の毛に照射しない
焦げたり、変形する原因となります。



ケア直後に香水やメイクアップ化粧品を使用しない
(保湿のためのクリーム、ローションは除く)
肌トラブルの原因となります。



異常が発生したらただちに使用を中止し、電源プラグを抜く
発煙、発火、感電、けがの原因となります。



改造、分解、修理しない
発火、感電、けがの原因となります。



DCプラグ、アダプター用プラグ、電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不十分なままで使用すると、感電や発火の原因となります。



ゆるみのあるコンセントは使用しない
感電、ショート、発火の原因となります。



電源ケーブルと電源アダプターを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、たばねたり、加工したりしない
発煙や発火の原因となります。



指定された電源電圧以外の電圧で使用しない
感電や発火の原因となります。本製品の電源アダプターの入力電圧はAC100V-240Vです。



電源アダプターを布やカバーで覆わない
熱がこもりケースが変形し、発火や感電の原因となります。



水をかけたり、水につけたりしない
感電や故障の原因となります。



警告

電源は専用電源アダプター以外からは取らない
発熱、発煙、発火、故障、けがの原因となります。



使用前に本体に変形、割れ、破損がないか確認する
事故やけがの原因となります。



落下時、破損時はただちに使用を中止する
そのまま使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因となります。



暗い部屋で使用しない
目を傷める原因となります。



照射部を直視しない、また、周りの人が見ないようにする
目を傷める原因となります。



吸気口、排気口をふさいで使用しない
発熱、発煙、発火の原因となります。



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない
事故やけがの原因となります。



ペットには使用しない
やけどやけがの原因となります。



電子レンジなどの過熱調理機器や高圧容器に入れない
発煙や発火の原因となります。



火の中に入れない
発熱、発火、破裂の原因となります。



ストーブなどの暖房器具の近くで使用、保管しない
発熱、発火の原因となります。



屋外、直射日光の下で使用、保管しない
故障の原因となります。



冷蔵庫の中で保管しない
故障の原因となります。



ぬれた手で使用しない
発熱、感電、故障などの原因となります。



お風呂など湿気の多い場所で使用、保管しない
感電や故障の原因となります。



電源プラグを抜くときは、ケーブルを持たず、
必ず電源プラグをもって引き抜く
感電、ショート、発火の原因となります。



お手入れの際は必ず電源プラグを抜く
感電の原因となります。



注意

肌がぬれた状態で使用しない
感電の原因となります。



同じ箇所に繰り返し照射しない
やけどやけがの原因となります。



使用時や使用直後は照射部に触れない
やけどの原因となります。



ネックレスなどの金属装飾品をつけたまま使用しない
事故やけがの原因となります。



落としたり、ぶつけたりしない
けがや故障の原因となります。



照射部が汚れていないか定期的に点検する
やけどや故障の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
感電、発煙、発火の原因となります。



4 製品の特長

本製品は光を肌に照射してムダ毛のケアを行う機器です。
照射部の周囲に冷却プレートを搭載し、照射と同時に肌をクールダウンします。
照射時の痛みや熱さをやわらげ、肌にやさしくケアします。



冷却プレート

電源を入れるとプレートが冷たくなります。
照射しながら肌を冷やします。

 照射回数500,000回

 出力レベル5段階

モード切り替え



シングルモード 手動で1回ずつ照射します。
連続照射モード 自動で連続照射します。



液晶モニター

残り照射回数、出力レベル、モード、
照射準備の状況が液晶モニターで確認できます。



肌検知センサー

照射部の両側についているセンサーが
肌を検知すると照射できます。




オートオフ機能


電源を入れた状態で3分間操作が
ないと自動で電源が切れます。

5 各部のなまえ

本体

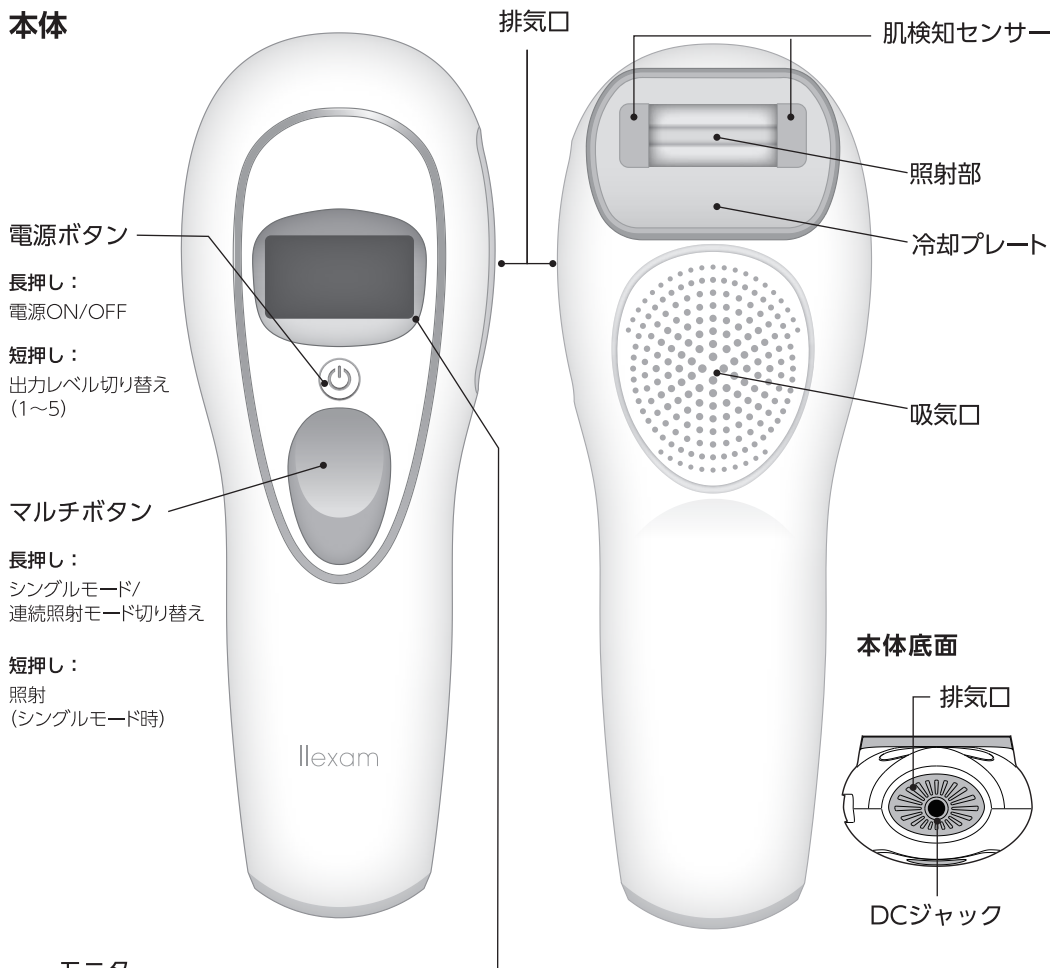


照射準備表示 残り照射回数

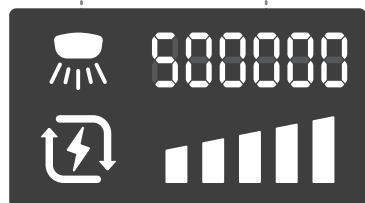


電源アダプター

アダプターソケット

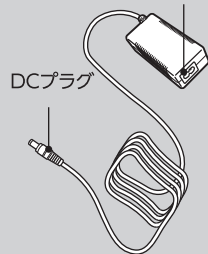

電源ケーブル

電源プラグ

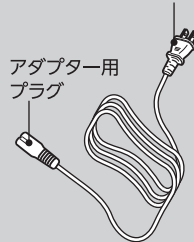

6 お使いになれる部位

時間はレベル1で使用した時の目安の時間です。




顔 (女性のみ)

🕒 約1分間


※ほほ骨より上には
使用できません。

■ 照射できないエリア

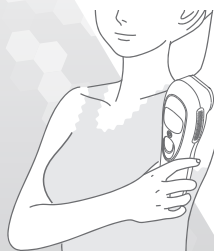

ワキ

🕒 約2分間

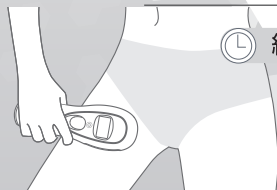



ビキニライン

🕒 約2分間



アシ


🕒 約10分間

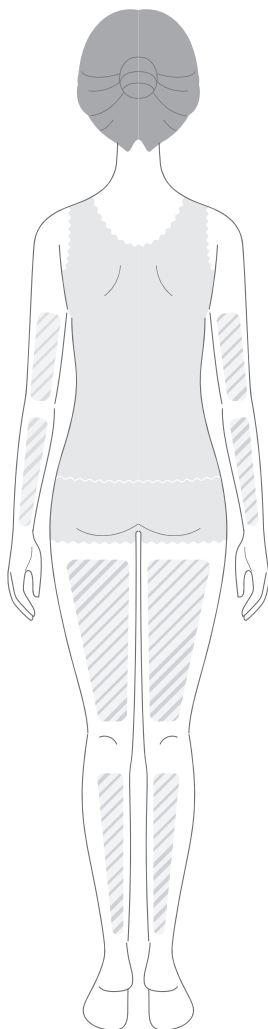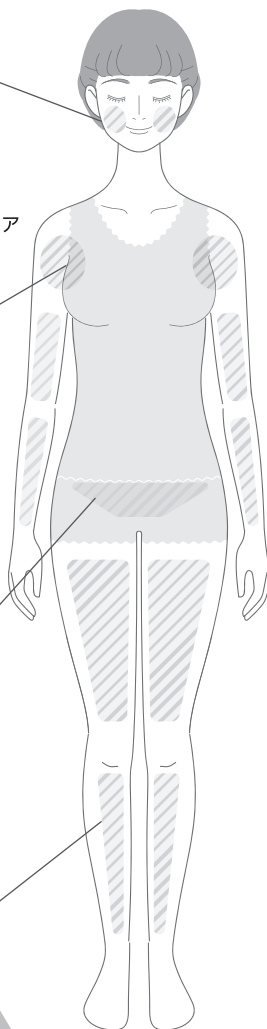

ご注意




お使いになれる部位

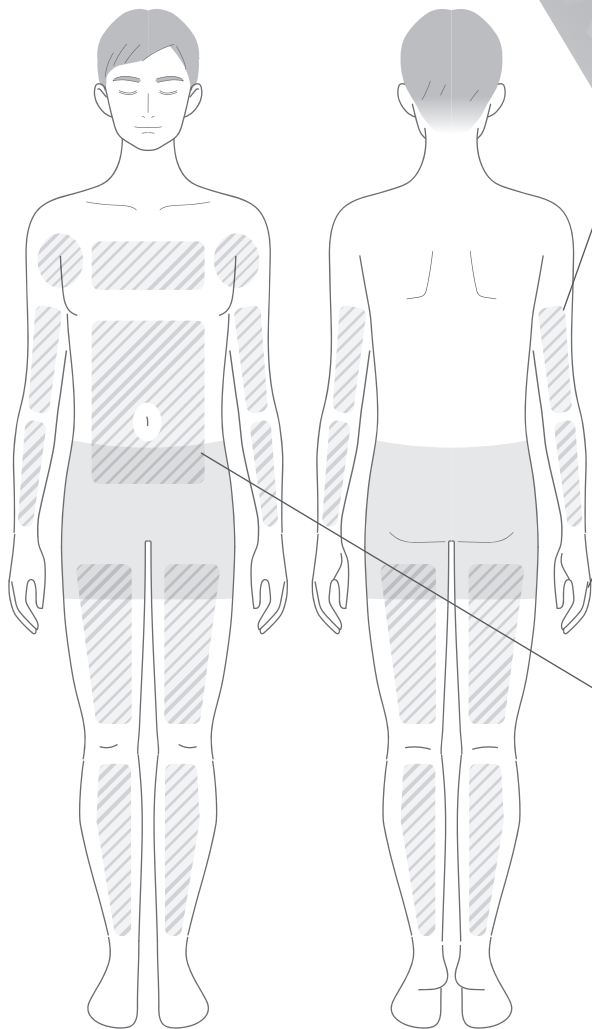

ウデ

⌚ 約6分間

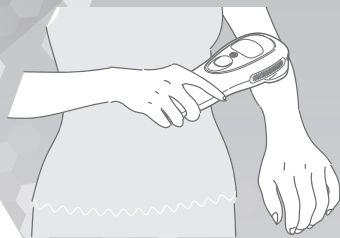


指

⌚ 約1分間



胸・腹 (男性のみ)

⌚ 各約3分間

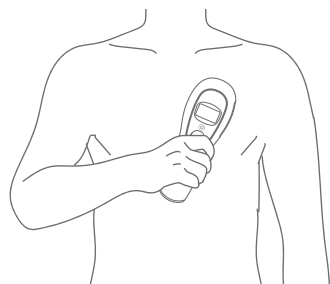

肌検知センサーに触れていないと照射できません。

※乳輪には使用しないでください。
※へそには使用しないでください。

7 お使いになれる頻度

最初の 1~4 週間	1週間	に1回程度
5~8 週間	1週間もしくは2週間	に1回程度
9~12 週間	2週間もしくは1ヶ月	に1回程度



毛の成長がみられなくなりましたら、上記の頻度でケアを行う必要はありません。
毛が再びみられるようになりましたら、必要に応じてケアを行ってください。

ご注意

- ・効果は、部位や個人の体質によって異なります。
- ・上記の頻度を超えてのご使用はおやめください。

8 お使いになる前に

肌の色、毛の色を確認する

別紙のカラーチャートを確認してください。



除毛する

ご使用前に必ず除毛してください。
毛が伸びていたり、お肌の表面に毛が残っていると、やけどの原因となります。ワックスや毛抜きなど、毛を毛根から抜く処理はしないでください。




メイクなどを落とす

素肌(メイクやローション、クリーム、香水などを洗い流した状態)に使用してください。
メイクの上から使用すると肌トラブルの原因となります。



モニター部分に貼られている保護フィルムをはがす

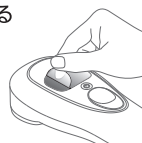

✓ パッチテスト

初めて使用するときや、しばらく使用しなかったときは、肌トラブルが起きないか確認するためにパッチテストを行ってください。(使いかたはp.10参照)

- ① 使用したい部位に出力レベル1で1回照射してください。
- ② 48時間後にテストした箇所に異常がないか確認してください。
赤くなるなど異常が見られましたら医師にご相談ください。

ご注意

- ・パッチテストを行った箇所は1週間照射しないでください。
- ・肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談してください。


9 使いかた

ご注意

- ・部屋を明るくしてご使用ください。 ・強い光が照射されるため近くに人やペットがいないことを確認してください。
- ・使用時に強い光が照射されます。使用箇所を直視しないようにご注意ください。
- ・顔に使用する際は目を閉じてご使用ください。


1.

電源を接続する

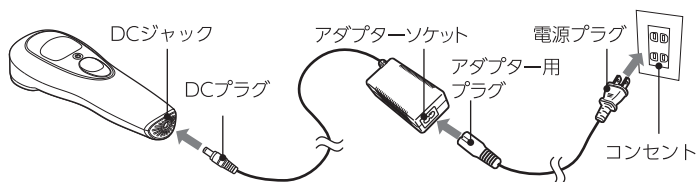

2.

電源を入れる

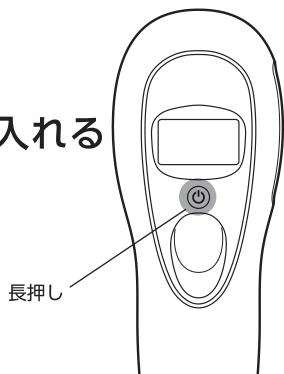


電源ボタンを長押し(2秒間)すると電源が入ります。
ピッと音がなりモニターが点灯します。
電源が入るとシングルモード、
出力レベル1になっています。

モニター表示



3.

出力レベルを切り替える

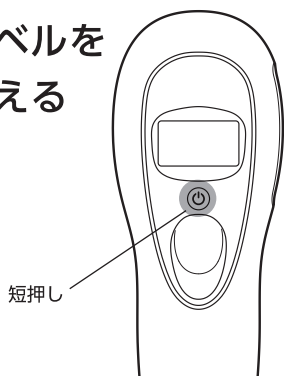

電源ボタンを短押しすると出力レベルを切り替えることができます。お使いの出力レベルを選んでください。


※初めてお使いになる方は、出力レベル1からのご使用をおすすめします。

レベル1	
レベル2	
レベル3	
レベル4	
レベル5	

4.

モードを切り替える

長押し

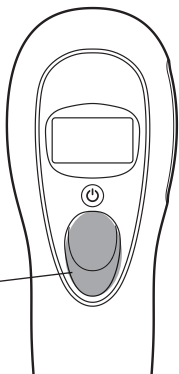

マルチボタンを長押し(2秒間)するとモードを切り替えることができます。

お使いになるモードを選んでください。

シングルモード

狭い範囲や敏感な部分などをケアしたいとき



連続照射モード

広い範囲を効率的にケアしたいとき
※連続照射モードは設定したレベルを連続で照射するモードです。
※連続照射モード時はレベル変更ができません。




それぞれのモードについては、下記のモード説明をご覧になりお使いください。


⚡ シングルモード

① 使用したい部位に押し当てる

隙間なく当てる

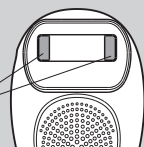

照射部と照射したい箇所に隙間がないように当ててください。
肌検知センサーに触れているとモニターが点滅します。
※肌検知センサーが肌に触れていないと照射できません。

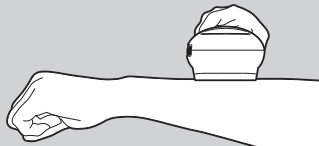

② 照射準備完了

モニター全体が点滅したら照射ができます。


ピカッ
ピカッ



照射準備完了!

③ 照射

押す

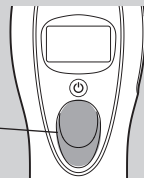


マルチボタンを押すと照射します。



④ 照射をくりかえす

照射位置をずらして ① ~ ③ の作業を繰り返します。
照射できる間隔は約1~3秒です。出力レベルにより異なります。

照射位置をずらす

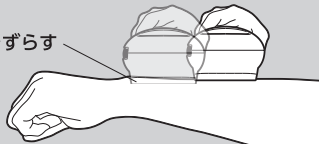


🔄 連続照射モード

1 使用したい部位に押し当てる



照射部と照射したい箇所に隙間がないように当ててください。
※肌検知センサーが肌に触れていないと照射できません。

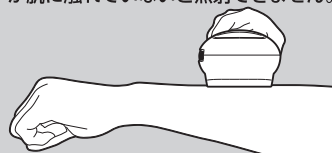


2 自動で照射

肌検知センサーが肌を検知するとすぐに照射されます。

本体を同じスピードで滑らせるように動かしてください。
照射の箇所が被らないようにご注意ください。
照射できる間隔は1~3秒です。出力レベルにより異なります。

3 照射をくりかえす

照射位置をずらす

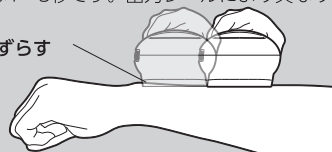


クールダウン機能

本体内部の温度が高くなると動作が停止し、20秒間クールダウンします。
※クールダウンするタイミングは出力レベルや周囲の環境で異なります。



5. 終了する

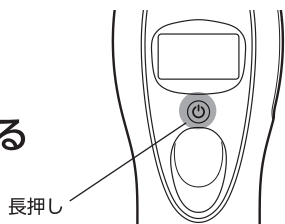

電源ボタンを長押し(2秒間)して
電源を切ってください。

コンセントから電源プラグを抜いてください。

※電源を切ると、本体内部の温度が冷却プレートに伝わり、
冷却プレートが暖くなる場合があります。
冷めるまで時間をおいてから片付けてください。

ご注意

- ・レベルが強くなると熱を強く感じますが異常ではありません。
- ・使用時に毛が焼けることによる煙やにおいが発生する場合があります。
- ・同じ場所に連続で照射しないでください。
- ・本製品はお使いになりながら冷却する機能がありますが、使用後に肌の熱やほてり赤みなどが気になる場合は氷水で冷やしたタオルなどで冷やしてください。
- ・強い痛みを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。


ご注意

- ・照射エラーが発生すると、「E30」と表示し30秒間動作が停止いたします。
- ・電源を入れた状態で3分間操作がないと自動で電源が切れます。 ・使用後はコンセントに差したままにしないでください。
- ・周囲の温度環境によっては、冷却プレートが十分に冷えず、冷たく感じない場合があります。

10 お手入れのしかた

- ・お手入れを行う際は必ず運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・使用直後は、照射部、冷却プレートが熱を持っているため、少し冷めてから行ってください。
- ・照射部や冷却プレート、本体は乾いた布でやさしくふき取ってください。

ふき取りにくい部分については、綿棒などを使用しやさしくふき取ってください。

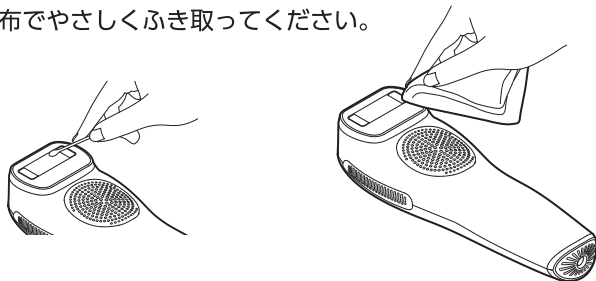

ご注意

- ・本製品には防水機能はありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品を使用しないでください。

11 トラブルシューティング (故障かな?と思ったら)

現象	原因	対処の方法
モニターが表示されない	電源が入っていない	電源アダプターと電源ケーブルを確実に接続する
	専用電源アダプターを使用していない	専用電源アダプターとケーブルを使用する
	電源ボタンを長押しする時間が短い	電源ボタンを長押し (2秒間) する
照射されない	肌検知センサーが反応していない	2つの肌検知センサー両方に触れる
	残り照射回数がない	使用できる照射回数は500,000回です 500,000回以上は使用できません
モード切り替えができない	マルチボタンを長押しする時間が短い	マルチボタンを長押し (2秒間) する
レベル切り替えができない	モードが連続照射モードになっている	マルチボタンを長押し (2秒間) して シングルモードに切り替える
電源が切れる	3分間操作していない	オートオフ機能がはたらいている
	エラーが発生している	電源プラグを抜き、しばらくしてから 電源プラグを差し込んで電源を入れる
クールダウン機能を頻繁に繰り返す	長く連続使用し、本体内部が発熱している	本体が常温になるまでしばらく使用しない
使用中に冷却プレートがぬれている	冷却プレートが結露している	異常ではありません 気になる方はふき取ってからご使用ください
冷却プレートが冷えない	周囲の温度が高いため、冷却できなくなっている	使用温度範囲内でご使用ください

症状が改善されない場合は、電源プラグを抜き、しばらくしてから電源プラグを差し込んで電源を入れてください。
リセットしても解決しない場合はお買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

12 本製品を廃棄する

本製品を廃棄する際は各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。

13 仕様

本体	外形寸法	幅74×高さ207×厚み51mm
	質量	約290g
	入力電圧/電流	DC12V/最大4A
	消費電力	最大48W
	使用温度範囲	5℃～35℃
電源アダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz
	出力	DC12V/最大4A
	長さ	約1.8m
電源ケーブル	長さ	約1.5m

14 保証とアフターサービス

■保証書

保証書はよくお読みの上で、購入証明書（レシート等）と共に大切に保管してください。
保証期間はご購入日から1年間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

マクセルお問い合わせ

検索