

取扱説明書

本品は「低周波治療器 MXTS」、「低周波治療器 MXTS-MR100」と組み合わせて使用するための接続ケーブルです。ご使用前に本品と「低周波治療器 MXTS」、「低周波治療器 MXTS-MR100」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>



「禁止」(してはいけないこと)を示します。



「強制」(必ず守ること)を示します。

警告



必ず守る

- コードに傷がある状態や断線した状態で使用しない。
- 接続ケーブルを接続するときは必ず電源を切る。
強いショックを受けるおそれがあります。

注意



必ず守る


- 接続ケーブルを使用するときは首にからまないように注意する。
- 接続ケーブルの端子に本体、ゲルシート以外を接続しない。
事故やけがのおそれがあります。



禁止


- 極端に曲げたり、引っ張ったりしない。
- コードを持って本体をぶら下げたり、振り回したりしない。
事故や故障のおそれがあります。

各部の名称

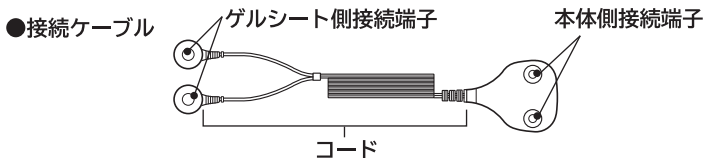


使用前の準備

1 接続ケーブルのゲルシート側接続端子とゲルシートの通電端子を接続する。

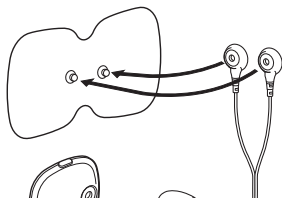

2 接続ケーブルの本体側接続端子と本体の出力端子を接続する。

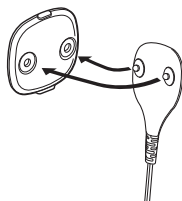

- 接続端子は左右どちらの向きでも使用できます。
- 取りはずしの際はコードを持たずにはずしてください。
- 本体やゲルシートにコードを巻きつけないでください。
- 保管時は本体やゲルシートから取りはずして保管してください。

仕様

コード長さ	約1.2m
質量	約14g

ご購入に関するお問い合わせは、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。

マクセル株式会社

〒151-8527
東京都渋谷区元代々木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)